



**ALBO**<sup>®</sup>  
healthcare



# **Aparent<sup>®</sup> AKTIV** MODE D'EMPLOI



1.0	<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>03</b>
2.0	<b>Généralités</b>	<b>04</b>
2.1	<b>Remarques préalables</b>	<b>04</b>
2.2	<b>Appréciation globale des risques</b>	<b>04</b>
2.3	<b>Signes et symboles</b>	<b>04</b>
2.4	<b>Utilisation conforme</b>	<b>04</b>
2.5	<b>Indications</b>	<b>04</b>
3.0	<b>Aperçu du produit et de la fourniture</b>	<b>05</b>
3.1	<b>Contrôle de la fourniture</b>	<b>05</b>
3.2	<b>Description de l'accessoire de positionnement du bras Aparent® AKTIV</b>	<b>05</b>
3.3	<b>Identification et plaques signalétiques</b>	<b>05</b>
4.0	<b>Utilisation de l'accessoire de positionnement du bras Aparent® AKTIV</b>	<b>06</b>
4.1	<b>Montage</b>	<b>06</b>
4.2	<b>Préparation avant le positionnement</b>	<b>06</b>
4.3	<b>Positionnement du bras atteint</b>	<b>06</b>
4.4	<b>Positionnement de la main atteinte</b>	<b>06</b>
5.0	<b>Consignes d'entretien</b>	<b>07</b>
5.1	<b>Nettoyage et désinfection</b>	<b>07</b>
5.2	<b>Réparation</b>	<b>07</b>
6.0	<b>Élimination</b>	<b>08</b>
7.0	<b>Réutilisation</b>	<b>08</b>
8.0	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>08</b>

## 1.0 Consignes de sécurité importantes

Afin de garantir une utilisation en toute sécurité de l'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** et d'obtenir les meilleurs résultats thérapeutiques, apprenez à manipuler ce produit auprès d'un professionnel avant de l'utiliser pour la première fois. Respectez impérativement les consignes de sécurité suivantes et lisez attentivement l'intégralité du mode d'emploi.

- Vérifiez systématiquement avant de l'utiliser que l'accessoire de positionnement du bras est correctement et solidement fixé à son support (par ex. la tablette d'un fauteuil roulant ou une table), afin d'éviter qu'il bascule ou se dérobe soudainement.
- Ne vous asseyez jamais sur l'**Aparent® AKTIV**.
- N'utilisez jamais l'accessoire de positionnement du bras comme surface d'appui.
- N'effectuez jamais de mouvements brutaux pour positionner votre bras et votre main atteints, en particulier en présence d'une spasticité. Un positionnement brutal pourrait provoquer des lésions des muscles, des tendons et des ligaments atteints.
- En cas de douleurs, ne positionnez pas votre bras et votre main atteints sur l'accessoire, car les mouvements douloureux favorisent l'apparition de spasmes.
- Une fois votre bras et votre main atteints placés sur l'accessoire, vérifiez que ces derniers sont bien installés dans une posture optimale du point de vue physiologique. Vérifiez en particulier que l'épaule touchée est elle aussi placée dans une posture correcte du point de vue physiologique.
- N'exposez jamais l'**Aparent® AKTIV** aux rayons directs du soleil. La surface peut chauffer et entraîner un risque de brûlure.

## 2.0 Généralités

### 2.1 Remarques préalables

Chère utilisatrice, cher utilisateur, vous avez opté pour un produit fiable et sophistiqué, conçu avec les technologies les plus modernes. Ce mode d'emploi permet aux professionnels et aux utilisateurs de l'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** de l'utiliser en toute sécurité, sans danger et avec les bénéfiques thérapeutiques attendus. Il décrit la préparation, la manipulation, l'utilisation et l'entretien du produit. Pour exploiter intelligemment le potentiel de ce produit et préserver la sécurité d'utilisation de celui-ci, lisez le mode d'emploi, respectez les instructions fournies et veillez à ce que les utilisateurs aient accès à ce mode d'emploi.

### 2.2 Appréciation globale des risques

Utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné (utilisation conforme), l'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** ne présente aucun danger. Les matériaux employés et la structure sont conformes aux exigences des directives européennes applicables, de la loi allemande sur les dispositifs médicaux et des normes relatives à ceux-ci.

### 2.3 Signes et symboles



Attention ! Indique une consigne de sécurité particulièrement importante. Respecter les indications de la notice d'utilisation !



Important ! Indique une information particulièrement utile dans le contexte concerné.

### 2.4 Utilisation conforme

L'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** est conçu pour les personnes atteintes d'hémiplégie flasque ou spasmodique, provoquée par des troubles neurologiques ou une lésion cérébrale (par exemple suite à accident vasculaire cérébral), ou présentant l'une des autres indications mentionnées au **chapitre 2.5**. L'accessoire de positionnement du bras est destiné avant tout à soulager les membres supérieurs touchés en assurant une posture physiologique correcte de l'épaule, du bras et de la main touchés. Il doit également apporter une aide à l'utilisateur dans le cadre de son programme de rééducation et lui permettre d'exercer en toute autonomie son bras et sa main atteints de parésie à la maison, en complément de la prise en charge par un kinésithérapeute. La posture physiologique et les exercices thérapeutiques doivent en définitive viser à contrecarrer l'apparition d'une affection spasmodique, soulager ou atténuer une spasticité existante, et prévenir la formation de contractures. Les consignes de sécurité et les caractéristiques techniques doivent également être respectées.

### 2.5 Indications

- Hémiplégie
- Hémiplégie
- Accident vasculaire cérébral
- Œdèmes d'origine non inflammatoire au niveau des mains ou des doigts

## 3.0 Aperçu du produit et de la fourniture

### 3.1 Contrôle de la fourniture

L'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** se présente dans une pochette de protection. Veuillez conserver dans la mesure du possible cette pochette de protection. Elle vous sera utile ultérieurement pour ranger ou transporter le produit. Après réception de la marchandise, veuillez contrôler l'intégralité de son contenu. Son contenu comprend :

- 1 accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV**
- 1 housse pour l'accessoire de positionnement du bras
- 3 éléments de tailles différentes pour la main
- 1 mode d'emploi

### 3.2 Description de l'accessoire de positionnement du bras

#### Aparent® AKTIV

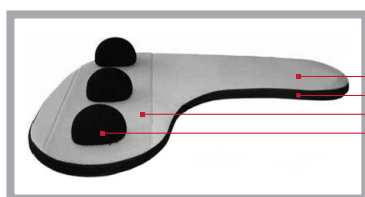


Figure 1 – Vue de dessus

- Accoudoir rembourré
- Fermeture à glissière
- Bandes auto-agrippantes
- Élément pour la main (100 % mousse de polyéthylène avec revêtement en polyester)



Figure 2 – Vue de dessous

- Revêtement imitation cuir antidérapant (100 % polyamide)

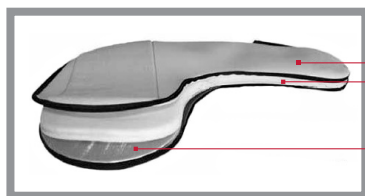


Figure 3

- Revêtement (100 % polyester)
- Rembourrage en mousse (100 % polyuréthane)
- Plaque de base (aluminium)



### 3.3 Identification et plaques signalétiques

Les informations relatives au type, au fabricant et à l'utilisation du produit sont précisées sur ce dernier, ou jointes au produit. Les indications doivent rester lisibles. Remplacez immédiatement toute indication illisible ou manquante. La plaque signalétique est très importante pour l'identification du produit. Elle ne doit pas être retirée.

## 4.0 Utilisation de l'accessoire de positionnement du bras Aparent® AKTIV

### 4.1 Montage



- Sortez l'accessoire de positionnement du bras de sa pochette de protection.
- Placez l'accessoire de positionnement du bras sur la tablette du fauteuil roulant ou sur une table, afin de garantir un positionnement parfaitement plan.

### 4.2 Préparation avant le positionnement



En présence d'une spasticité, il est bénéfique de l'atténuer grâce à des gestes médicaux antispastiques, avant de positionner le bras et la main atteints sur l'accessoire. Ces gestes doivent être réalisés par un professionnel dûment formé.

### 4.3 Positionnement du bras atteint



- Placez le bras atteint sur l'accessoire de positionnement du bras.
- Positionnez le bras dans une posture correcte du point de vue physiologique : le bras doit être placé le long du corps, légèrement tourné vers l'extérieur, le coude doit être légèrement replié et le dessous de l'avant-bras doit reposer complètement sur l'accessoire de positionnement du bras.



Figure 4 – Positionnement du bras

N'effectuez aucun mouvement brutal pour positionner le bras atteint sur l'accessoire. Un positionnement brutal pourrait provoquer des lésions des muscles, des tendons et des ligaments atteints. En cas de douleurs, ne positionnez pas votre bras atteint sur l'accessoire, car les mouvements douloureux favorisent l'apparition de spasmes.

### 4.4 Positionnement de la main atteinte



Après avoir positionné votre bras, placez l'élément pour la main dans la position de cette dernière. Placez la paume de votre main sur l'élément. La main atteinte est placée dans une posture correcte du point de vue physiologique lorsque la paume repose entièrement sur l'accessoire de positionnement du bras et que le revers de la main forme une ligne droite continue avec l'avant-bras.



Figure 5 – Positionnement de la main

N'effectuez jamais de mouvements brutaux pour positionner votre main atteinte. Ne forcez pas sur vos doigts pour les ouvrir. Un positionnement brutal pourrait provoquer des lésions des muscles, des tendons et des ligaments atteints.

En cas de douleurs, ne positionnez pas votre main atteinte sur l'accessoire, car les mouvements douloureux favorisent l'apparition de spasmes.

## 5.0 Consignes d'entretien

### 5.1 Nettoyage et désinfection

La housse de l'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** est amovible et lavable en machine à 40 °C maximum avec une lessive pour linge délicat. Elle peut également être désinfectée à l'aide de désinfectants classiques.



N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur !

### 5.2 Réparation

L'accessoire de positionnement du bras **Aparent® AKTIV** est fabriqué dans un matériau extrêmement résistant. Si toutefois ce matériau venait à être endommagé, contactez votre revendeur.

## 6.0 Élimination

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre accessoire de positionnement du bras **Apurent® AKTIV** et désirez le mettre au rebut, veuillez vous adresser à votre revendeur. Si vous souhaitez vous charger vous-même de son élimination, renseignez-vous auprès des entreprises de recyclage locales pour connaître les dispositions en matière de recyclage en vigueur dans votre lieu de résidence.

## 7.0 Réutilisation

L'accessoire de positionnement du bras **Apurent® AKTIV** n'est généralement pas conçu pour être réutilisé. S'il devait être réutilisé, votre revendeur se chargera de son nettoyage et l'équippa d'une housse neuve.

## 8.0 Caractéristiques techniques

<b>Dimensions avec l'élément pour la main</b>	<b>L 58,0 x B 40,0 x H 7,5 cm</b>
<b>Poids</b>	<b>970 g</b>